




YÜZ VE BOYUN İÇİN CİLT BAKIM CİHAZI IYO FACE & NECK COLLAGEN BOOSTER

TR Kullanım Kılavuzu ve Garanti Bilgileri

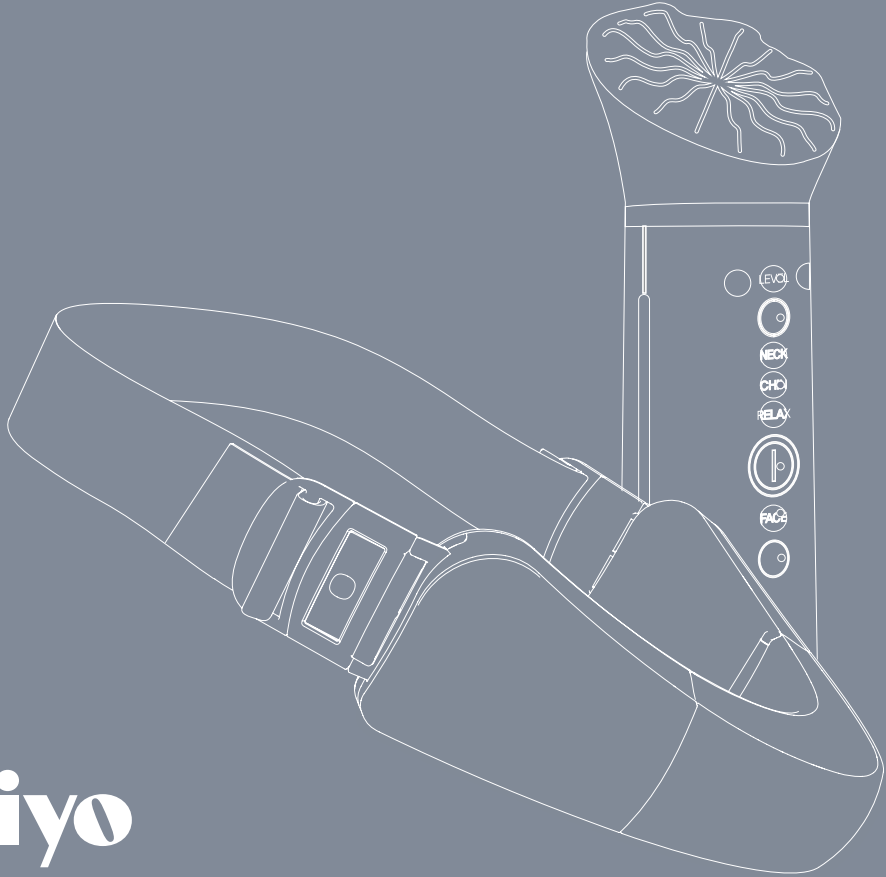

iyo





İÇİNDEKİLER

İçindekiler.....	02
01 // Kullanım Kılavuzundaki İşaretler.....	04
02 // Güvenlik Uyarıları.....	04
03 // Genel Bakış.....	07
03 // Ürün İçeriği.....	07
03 // Ürün Görseli ve Detaylı İsimler.....	07
04 // Mikro Akım Nedir?.....	08
04 // Kullanım Alanları/Uygulama Bölgeleri.....	08
04 // Kullanım.....	09
04 // Pili Şarj Etme.....	09
05 // Kalan Pil Kontrolü	09
05 // Cihazı Açma/Kapama.....	10
05 // Hangi Modda Olduğunuzu Nasıl Anlarsınız?.....	10
06 // Bekleme Modu.....	10
10 // Boyun Çene Modu İçin Titreşim Modunun Kapatılması.....	11
07 // Modların Kullanımı.....	11
08 // Kullanım Sonrası Temizlik.....	16
08 // Sorun Giderme.....	16
09 // Teknik Bilgiler.....	17
09 // İmha Etme.....	17
10 // Garanti Şartları.....	18





YÜZ VE BOYUN İÇİN CİLT BAKIM CİHAZI IYO FACE & NECK COLLAGEN BOOSTER

IYO FACE & NECK COLLAGEN BOOSTER, kendi profesyonel cilt bakımınızı ve masajınızı dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde rahatlıkla yapabilmeyi sağlayan bir yüz ve boyun için cilt bakım cihazıdır. Kolay kullanımı ve rahat taşınabilirliği sayesinde günlük hayatınızın yoğun temposunda dahi yüz bakımınızı yapabilmeyi ve cildinizin daha sağlıklı bir görünüme ulaşmasına yardımcı olur. Çalışırken veya kısa bir mola verdiğinizde boyun ve çene bandını takarak cilt bakımınızı kolayca yapabilirsiniz. Aynı anda kumandayı kullanarak yüzünüze veya vücudunuza bakım yapabilirsiniz.

Yüz ve boyun için cilt bakım cihazınızın beş farklı fonksiyonu vardır:

- Kırmızı renk terapisi fonksiyonu ile kolajen üretimi uyarılmasına, kan dolaşımınızın artmasına, kırışıklıklarınızın azalmasına ve cildinizin daha esnek hale gelmesine yardımcı olur.
- Mavi renk terapisi fonksiyonu ile cilt tonunuzun dengelenmesini destekler, antibakteriyel ve antiinflamatuvar etki sağlamaya yardımcı olur.
- Yakın kızılötesi ışın fonksiyonu ile hücre yenilemesi tetiklenir, cildinizde iyileştirici etki oluşmasını destekler.
- Mikro akım fonksiyonu ile cildiniz gerginleşir, yüz kaslarınız sıkılaştırılır, kolajen uyarılmasını destekler.
- Mikro titreşim fonksiyonu ile kan dolaşımınız artar, bakım ürünlerinizin emilimi kolaylaştırır, istenen etki daha da güçlenmesini destekler.

Yüz ve boyun için cilt bakım cihazınız cildinizin ihtiyacına göre Neck Mode (Boyun Modu), Chin Mode (Çene Modu), Relax Mode (Rahatlama Modu) ve Face Mode (Yüz modu ile size dört farklı modda kullanım imkânı sunar.

Yüz ve boyun için cilt bakım cihazının IYO'nun önerdiği yüz bakım ürünleri ile kullanılması tavsiye edilmektedir.

iyo





01 KULLANIM KILAVUZUNDAKİ İŞARETLER

⚠ Bu işaret sizi yaralanma tehlikelerine karşı uyarır.

i Ek bilgiler bu işaretle gösterilmiştir.

TEHLİKE sözcüğü, olası ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikeye karşı uyarır.

UYARI sözcüğü, olası yaralanmalara ve ciddi maddi hasarlara karşı uyarır.

DİKKAT sözcüğü, olası hafif yaralanmalara ve hasarlara karşı uyarır.

Kullanım öncesi bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyunuz, ürünü kullanırken bu kılavuzda verilen talimatlara uyunuz.

⚠ Güvenlik Uyarıları

- Bu elektrikli alet çeşitli emniyet sistemlerine sahiptir, yinde ürünü kullanırken bu kılavuzda belirtilen temel güvenlik uyarılarına her zaman uymalısınız.
- Kullanım öncesi bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyunuz, ürünü kullanırken bu kılavuzda verilen talimatlara uyunuz. Gerekliğinde sonradan tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayınız.
- Bu ürün yalnızca özel kullanım için tasarlanmıştır, güzellik merkezleri gibi ticari amaçlı kullanıma uygun değildir. Ürünü kullanım amacı dışında kullanmayınız.

Ürünü aşağıdaki durumlarda ve yerlerde kullanmayınız:

- Herhangi bir cilt tedavisi görüyorsanız veya bir cilt rahatsızlığınız varsa
- Aşırı bronzlaşmış bir cildiniz varsa
- Cildinizin kırmızı-mor renkte görünmesine sebep olan deri altı kanamanız varsa
- Yoğun iltihaplı, açık yara şeklinde veya kaşıntılı, kırmızı ya da döküntülü sivilcelerinizi varsa
- Işık alerjiniz varsa veya ışık alerjisine sebep olabilecek bir ilaç (tetrasiklin gibi) kullanıyorsanız
- Metal alerjiniz varsa
- Cilt yaranız varsa
- Kaşıntılı, kuru, döküntülü ve tahriş olmuş bir cildiniz varsa
- 18 yaşından küçükseniz
- Radyoterapi veya kemoterapi tedavisi alıyorsanız
- Ciddi kalp rahatsızlığınız varsa veya kalp pili kullanıyorsanız
- Tiroid hastasıysanız veya epilepsiniz varsa



- Kan dolaşım bozukluğunuz veya şeker hastalığınız varsa, veremseniz, lupus hastasıysanız, vücudunuzda tümör varsa, yüzünüzde şiddetli ağrılara sebep olan sinirsel bir hastalığınız (yüz nevrojisi) varsa ya da genetik kaynaklı ışığa karşı aşırı duyarlılığa yol açan bir rahatsızlığınız (porfir) varsa
- Yüzde kemik kırılması veya kemik erimesi durumunuz varsa
- Hamileyseniz, emziriyorsanız veya regl dönemindeyseniz.
- Eğer önceden cildinize Botoks, dolgu gibi bir cilt tedavisi uygulandıysa, plastik cerrahi geçirdiyse veya emin olmadığınız bir durum varsa bu ürünü kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
- Bu ürünü göz, kulak, dudak, ağız içi ve özel bölgelerinizde kullanmayınız.

Aşağıdaki durumlar olası ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikeye sebep olabilir, bu sebeple en yüksek seviyede dikkatli olmanızı gerektirir

⚠ TEHLİKE

- Bu ürünü çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.
- Küçük çocuklarda boğulma tehlikesine sebep olabileceğinden, çocukları ürünün ambalajından uzak tutunuz.
- Çok hassas ciltleri olduğu için bu ürünü çocuklarda kullanmayınız. Bu ürün elektronik cihaz kullanım kabiliyeti kısıtlı kişilerde ancak yetişkinlerin gözetiminde, güvenli kullanım için talimatlara uyabilecekleri ve

olası tehlikeleri yeterince anladıkları durumda kullanılabilir veya ürün bakımı/temizliğini yapmak için izin verilebilir.

- Bu elektronik aleti, şarj adaptörünü veya USB kablosunu suya daldırmayınız, akan suda yıkamayınız.
- Ürünü akan suyun civarında veya içinde bulunan yerlerin yakınında kullanmayınız, şarj etmeyiniz. Banyo gibi rutubetli yerlerde ürünü muhafaza etmeyiniz.
- Bu elektronik aleti şarj esnasında suya düşürürseniz, asla dokunmayınız. Şarj adaptörünü prizden veya USB kablosunu girişinden derhal çekiniz. Tekrar çalıştırmadan önce tüm bileşenlerin kurduğundan emin olunuz.
- Bu elektronik aleti şarj ederken USB girişine, adaptöre veya prize ıslak elle dokunmayınız.
- Bu ürünün LED (ışık yayan diyot) özelliği bulunmaktadır. Işık kaynağına direkt olarak çıplak gözle asla bakmayınız ya da cihazı gözlerinize tutmayınız.
- Cihazı kullanırken çok fazla cilt bakım ürünü kullanılması cihazın arızalanmasına sebep olabilir.
- Bu elektronik aleti mutfak ocağı yakınında veya araba gibi sıcak ve tozlu yerlerde kullanmayınız, şarj etmeyiniz ve saklamayınız. Bu durum, ürünün bozulmasına veya ömrünün kılmasına sebep olabilir.
- Ürünü yalnızca bağlantısı talimatlara uygun olarak yapılmış ve şarj adaptörünün teknik bilgileri ile uyumlu şebeke gerilimine sahip bir prize takınız.



01 KULLANIM KILAVUZUNDAKİ İŞARETLER

⚠ Güvenlik Uyarıları

- Ürün tamamen şarj olduğunda, fırtına esnasında veya ürün temizliği/bakımı öncesi adaptörünü prizden veya USB kablosunu bağlantı yuvasından çıkartınız.
- Ürününüzü kutuda verilen USB kablosu ile uyumlu bir adaptörle birlikte kullanınız.
- Gerekli durumda, USB kablosunu hızlı ve kolaylıkla çıkarabileceğiniz bir priz kullanınız. Kabloyu takılmalara sebep olmayacak şekilde yerleştiriniz, kabloyu bükmeyiniz veya sıkıştırmayınız, keskin kenarlı yüzeylerden veya cisimlerden uzak tutunuz.
- Ürünü yere düşürmeyiniz veya dışarıdan darbeye maruz bırakmayınız. Elektronik alette, şarj adaptöründe veya USB kablosunda gözle görülür hasar varsa ürünü kullanmayınız.
- Elektronik aleti parçalarına ayırmayınız veya parçalarda değişiklik yapmayınız. Gerekli onarımları yalnızca yetkili serviste yaptırınız. USB kablosu hasar gördüğünde yenisiyle değiştiriniz.

Aşağıdaki durumlar olası yaralanmalara ve ciddi maddi hasarlara sebep olabilir, bu sebeple çok dikkatli olmanızı gerektirir (UYARI)

- Ürünü göz çevrenizde veya yakınında kullanmayınız.
- Boyun ve çene modunu uyku sırasında kullanmayınız.
- Aynı ürünü bir başkasıyla paylaşmayınız.
- Isıyı doğru şekilde algılayamıyorsanız bu ürünü kullanmayınız. Şeker hastalığı gibi rahatsızlıklar, vücudun ısı algılama sistemini bozabilir. Engelli veya hasta kişiler çok sıcak hissettiklerinde bunu ifade edemeyebilirler. Bu sebeple bu kişilerde ürünü kullanmayınız.

- Tavsiye edilen kullanım sıklığı 30 dakikalık günlük kullanım süresi ile günde bir kezdir.
- Önerilen kullanım sıklığı kişinin cilt tipine veya durumuna göre değişebilir. Cilt durumunuza göre kullanım sıklığınızı ayarlayınız.
- Ürünü kullanırken veya kullanım sonrası bir rahatsızlık hissederseniz, kullanımı derhal durdurunuz ve bir doktora danışınız.

Aşağıdaki durumlar olası hafif yaralanmalara ve maddi hasarlara sebep olabilir, bu sebeple dikkatli olmanızı gerektirir

DİKKAT

- Şarj adaptörünü prize takmadan önce USB kablosunu aletin şarj girişine, USP kablosunun diğer ucunu da adaptöre takınız.
- Her kullanım sonrası ürünü bir ıslak mendille, yumuşak kumaşla veya pamuklu çubukla iyice temizleyiniz. Temizlerken kimyasal kullanmayınız.
- Ürünü kullanmayacaksanız kapatınız ve bu şekilde muhafaza ediniz.
- Ürünün uzun süre kullanılmaması, pilin tamamen tükenmesine ve pil ömrünün kısalmasına sebep olabilir. Kullanılmadığı durumda, pil yılda iki defa tamamen deşarj edilip, yeniden şarj edilmelidir.

Ek Bilgiler




Hassas ciltli kişilerde deride şişlik ve tahriş meydana gelebilir. Gerekirse, kullanım öncesi ürünü alt kolunuzun altındaki bir bölgede test ediniz. Olası cilt reaksiyonlarını önlemek için cihazı başlangıçta daha kısa bir süreliğine uygulayınız.

Mikro akımın akması için hem iyon terminalinin hem de iyon başlığının ciltle temas etmesi gerekir, bu nedenle cildinizle iyi temas sağladığınızdan emin olunuz.

02 GENEL BAKIŞ

ÜRÜN İÇERİĞİ

Ürün kutusunda IYO Face & Neck Collagen Booster ana ünitesi, IYO Face & Neck Collagen Booster kumandası, kumanda başlığı, kullanım kılavuzu, USB şarj kablosu, boyun/çene bandı, saklama çantası ve temizleme mendili bulunmaktadır.

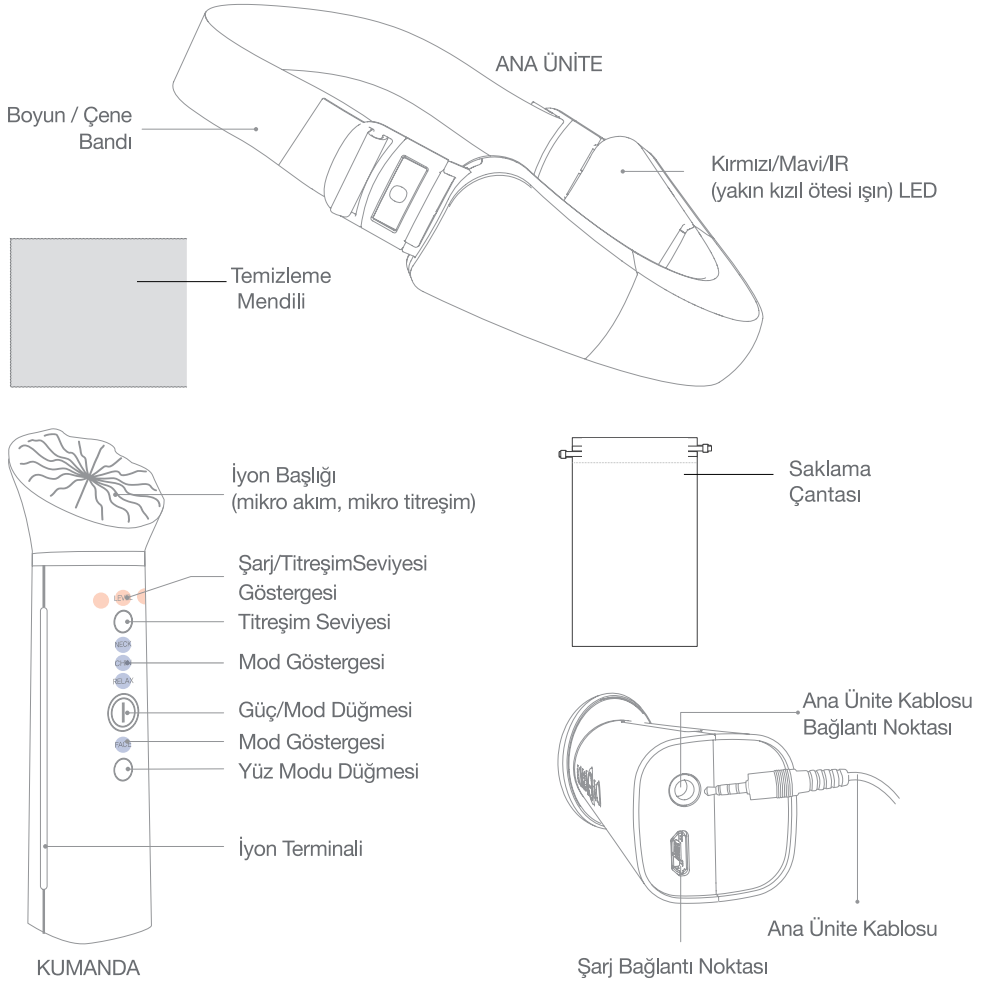

03 MİKRO AKIM NEDİR?

Cildi ve kasları şekillendirip, sıkılaştırmak için kullanılan düşük voltajlı elektrik akımıdır.

Kullanım Alanları/Uygulama Bölgeleri

- Yüz
- Boyun
- Çene Bölgesi

Cihazın her gün 1 kere kullanımı uygundur

Ciltteki Etkileri

- Yüz ve çene kaslarını rahatlatır, çene ovalinin esnekliğini artırır, aynı zamanda mikro akım ve kırmızı-mavi led ışık vererek kolajen üretiminin artmasını destekler.
- Boyun bölgesinde mikro akım ve kırmızı-mavi led ışık ile esnekliği artırarak ince çizgilerin oluşmasını önlemeye yardımcı olur.
- Aynı zamanda kontrol kumandası başlığı ile face modu seçildiğinde yüze masaj etkisi olup lenfatik drenaj sağlanarak cildi sıkılaştırmaya yardımcı olur.
- Kullanılan ürünlerin emilimini hızlandırmaya yardımcı olur.

04 CİHAZ KULLANIMI

Pili Şarj Etme


1. İlk kullanım öncesi, cihazı en az bir saat şarj ediniz.
2. Cihazı şarj etmek için önce USB kablosunu kumandanın şarj bağlantı noktasına takın, daha sonra kabloyu şarj adaptörüne bağlayınız. Ana ünite kablosunu da ana ünite kablosu bağlantı noktasından kumandaya bağlayınız.
3. Cihazı şarj etmek için kutudaki USB kablosunu DC 5V voltajından daha yüksek veya 1,5A'lık akım çıkışına sahip bir adaptöre (veya harici bataryaya) takınız. (Uygun olmayan bir adaptör kullanılması cihazın arızalanmasına neden olabilir.)
4. Ana üniteyi USB kablosuna bağladığınızda, şarj durumunu şarj/titreşim seviyesi göstergesinde görebilirsiniz. Şarj/titreşim seviyesi göstergesi soldan sağa kalan pil seviyesini gösterir.
5. Pilin azalması durumunda, şarj/titreşim seviyesi göstergesinde ortadaki şarj ışığı 5 saniye boyunca bip sesiyle yanıp söner ve ardından cihaz kapanır.

Cihazın tamamen şarj olması yaklaşık 3 ila 5 saat sürer. Şarj süresi, kalan pil seviyesine, ortam sıcaklığına veya şarj koşullarına bağlı olarak değişebilir. Cihazı kullanırken şarj kablosunu takarsanız, cihaz kapanacaktır. Cihazı kullanabilmek için şarj kablosunu çıkartınız. Şarj ederken cihaz çalışmamaktadır. Pili 10°C ila 40°C arasındaki sıcaklıklarda şarj ediniz. Pili kapasitesi en iyi oda sıcaklığında korunur. Sıcaklık düştükçe çalışma süresi de düşer, çok yüksek sıcaklıklar pil kapasitesine negatif etki eder.

Kalan Pil Kontrolü

Ana üniteyi USB kablosuna bağladığınızda, şarj durumunu şarj/titreşim seviyesi göstergesinde görebilirsiniz. Şarj/titreşim seviyesi göstergesi soldan sağa kalan pil seviyesini gösterir.

Kullanım sırasında pilin azalması durumunda, şarj/titreşim seviyesi göstergesinde ortadaki şarj ışığı 5 saniye boyunca bip sesiyle yanıp söner ve ardından cihaz kapanır.

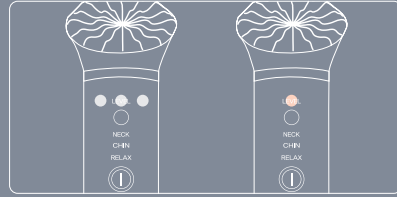

04 CİHAZ KULLANIMI


Cihazı Açıp/Kapatma

- Cihazı açıp kapatmak için güç/mod düğmesine bir saniye kadar basılı tutun.

Hangi Modda Olduğunuzu Nasıl Anlarsınız?

Mod göstergesinin durumuna göre geçerli çalışma modunu anlayabilirsiniz.

- 1) Geçerli çalışma modu devrede
- 2) Üç mod göstergesi de aynı anda yanıp sönerse, ana ünite kablosu bağlı değil. Ana ünite kablosu bağlı ise, cihaz bekleme modunda.

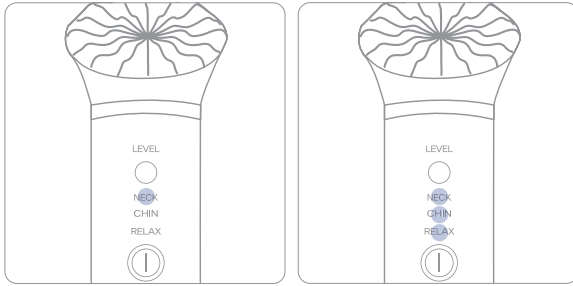

Bekleme Modu


Her modun çalışması bittiğinde, kısa bir bip sesinden sonra boyun, çene ve rahatlama mod göstergeleri eş zamanlı olarak yanıp söner ve cihaz bekleme moduna geçer. Bekleme modu yaklaşık 2 dakika sürer, bekleme modu sona erdiğinde cihaz otomatik olarak kapanır. Bir sonraki moda geçmek için, bekleme modunda iken güç/mod düğmesine düğmeye basarak istenilen moda seçebilirsiniz.



04 CİHAZ KULLANIMI


Boyun/Çene Modu İçin Mikro Titreşimin Kapatılması

Şarj titreşim seviyesi göstergesi sönene kadar titreşim seviyesi düğmesine basınız.

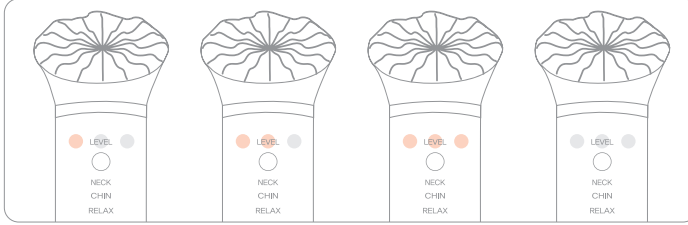

Modların Kullanımı

- Cihazı kullanırken çok fazla cilt bakım ürünü kullanılması cihazın arızalanmasına sebep olabilir.
- Işık kaynağına direkt olarak çıplak gözle asla bakmayınız ya da cihazı gözlerinize tutmayınız.

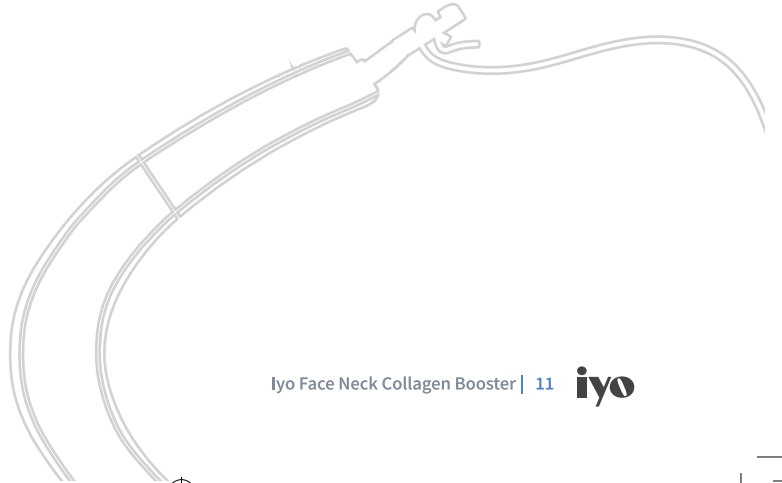

04 CİHAZ KULLANIMI

Cihaz ile birlikte kullanımı önerilen
cilt bakım ürünleri








Serum



Neck Mode / Boyun Modu


1. IYO'nun önerdiği yüz bakım ürününü boynunuzun etrafına eşit şekilde uygulayınız.
2. Ana ünite kablosunu kumandadaki ana ünite kablosu bağlantı noktasına takarak ana ünite ile kumandayı birbirine bağlayınız.
3. Harici kısa boyun bandının klipsini ana ünitenin bir ucuna sokunuz, klik sesiyle birlikte bandın bir ucu takılmış demektir. Ardından ana üniteyi boynunuza yerleştiriniz ve boyun bandının diğer klipsini ana ünitenin diğer ucuna sokunuz, klik sesiyle birlikte bandın diğer ucu da takılmış demektir.
4. Cihazın cildinize temas edeceği şekilde bandın uzunluğunu ayarlayınız. Cildiniz ana ünite ile uygun şekilde temas etmezse, mikro titreşimleri hissedemezsiniz.
5. Cihazı açmak için güç/mod düğmesine bir saniye kadar basılı tutunuz, ardından Boyun modunu seçmek için güç/mod düğmesine tekrar basınız. Cihaz halihazırda açıksa, Boyun modunu seçmek için güç/mod düğmesine hemen basmanız gerekmektedir.
6. Boyun modunu kullanmadan önce uygun titreşim yoğunluğunu seçmek için titreşim seviyesi düğmesine basınız.
7. Uygulama süresi yaklaşık 7 dakikadır.
8. Uygulama sonrası bandın bir uçtaki klipsine basarak ana üniteden ayırınız ve cihazı boynunuzdan çıkartınız.

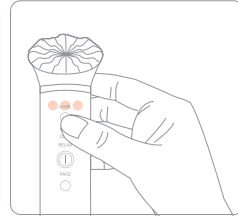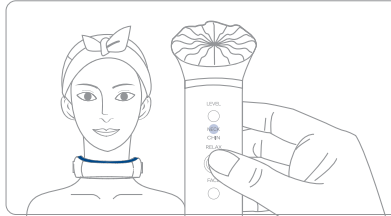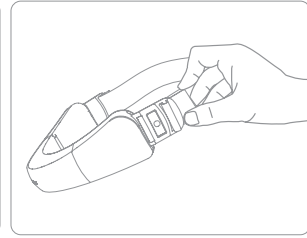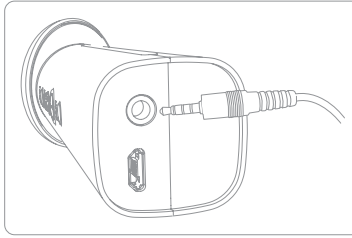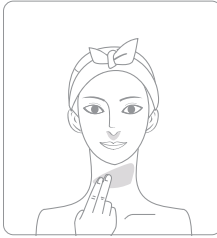

04 CİHAZ KULLANIMI

Chin Mode (Çene Modu)- Kırmızı ve Mavi Renk Terapisi, Opsiyonel Mikro Titreşim


1. IYO'nun önerdiği yüz bakım ürününü çenenizin etrafına eşit şekilde uygulayınız.
2. Ana ünite kablosunu kumandadaki ana ünite kablosu bağlantı noktasına takarak ana ünite ile kumandayı birbirine bağlayınız.
3. Harici uzun çene bandının klipsini ana ünitenin bir ucuna sokunuz, klik sesiyle birlikte bandın bir ucu takılmış demektir. Ardından ana üniteyi çenenize yerleştiriniz ve boyun bandının diğer klipsini ana ünitenin diğer ucuna sokunuz, klik sesiyle birlikte bandın diğer ucu da takılmış demektir.
4. Cihazın cildinize temas edeceği şekilde bandın uzunluğunu ayarlayınız. Cildiniz ana ünite ile uygun şekilde temas etmezse, mikro titreşimleri hissedemezsiniz.
5. Cihazı açmak için güç/mod düğmesine bir saniye kadar basılı tutunuz, ardından Çene modunu seçmek için güç/mod düğmesine tekrar basınız. Cihaz halihazırda açıksa, Çene modunu seçmek için güç/mod düğmesine hemen basmanız gerekmektedir.
6. Çene modunu kullanmadan önce uygun titreşim yoğunluğunu seçmek için titreşim seviyesi düğmesine basınız.
7. Uygulama süresi yaklaşık 7 dakikadır.
8. Uygulama sonrası bandın bir uçtaki klipsine basarak ana üniteden ayırınız ve cihazı çenenizden çıkartınız.

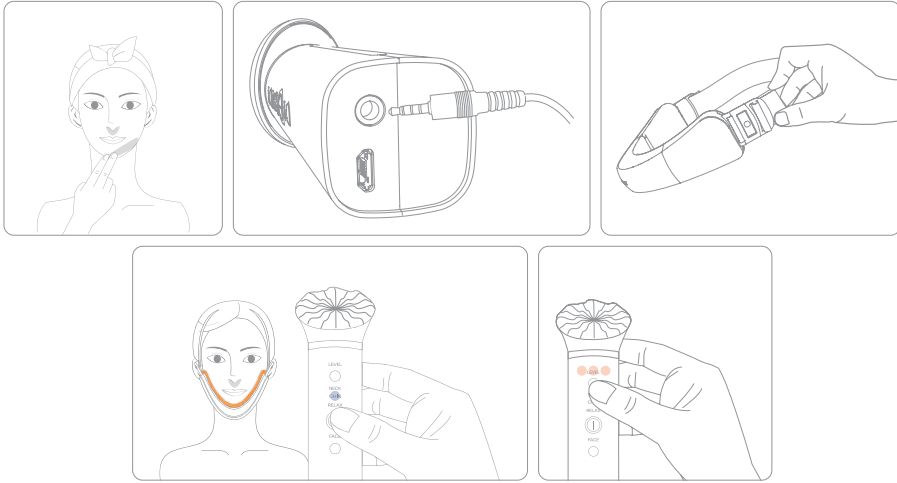

04 CİHAZ KULLANIMI

Relax Mode (Rahatlama Modu) - Yakın Kızılötesi Işın ve Mavi Renk Terapisi



1. Boyun veya Çene modunu uyguladıktan sonra, güç/mod düğmesine basarak Rahatlama modunu seçiniz.
2. Uygulama süresi yaklaşık 7 dakikadır.
3. Uygulama sonrası bandın bir uçtaki klipsine basarak ana üniteden ayırınız ve cihazı boynunuzdan/çenenizden çıkartınız.

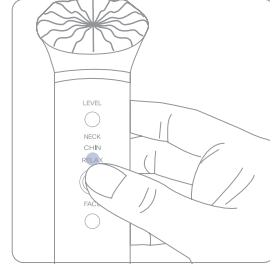

Mikro titreşim Rahatlama modunda çalışmamaktadır.

Face Mode (Yüz Modu) - Mikro Akım, Mikro Titreşim

1. IYO'nun önerdiği cilt bakım ürününü yüzünüze veya vücudunuzda masaj yapacağınız yere eşit şekilde uygulayınız.
2. Yüz modu düğmesi, kumanın iyon başlığındaki mikro akım ve mikro titreşim fonksiyonlarını aktive eder. Eğer cihaz kapalıysa, önce güç/mod düğmesine bir saniye kadar basılı tutarak cihazı açınız.
3. Kumandanın iyon başlığını kullanarak yüzünüze veya vücudunuza masaj yapınız.
4. Uygulama süresi yaklaşık 7 dakika olacak şekilde masaj yapmaya devam ediniz.

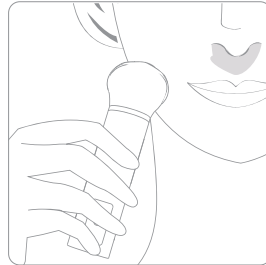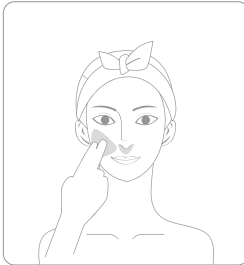




04 CİHAZ KULLANIMI

i

- Cihazı Yüz modunda kullanırken parmaklarınızın kumandanın yanındaki iyon terminali ile temas halinde olduğundan emin olunuz.
- Kumanda ile Yüz modunda masaj yaparken eş zamanlı olarak ana ünite ile Boyun/Çene modunu da kullanabilirsiniz. Ana ünite ile kumanda bağlantısı olmasa ile yalnızca kumandayı kullanarak cihazı Yüz modunda çalıştırabilirsiniz.
- Ayarladığınız moddan bağımsız olarak cihazınızı dilediğiniz anda kapatabilirsiniz. Cihazı kapatmak için güç/mod düğmesine bir saniye kadar basılı tutun. Cihaz 2 dakikalık bekleme süresinin ardından otomatik kapanır.
- Cihaz ile uygulamanız tamamlandığında, makyajınızı yapabilirsiniz.

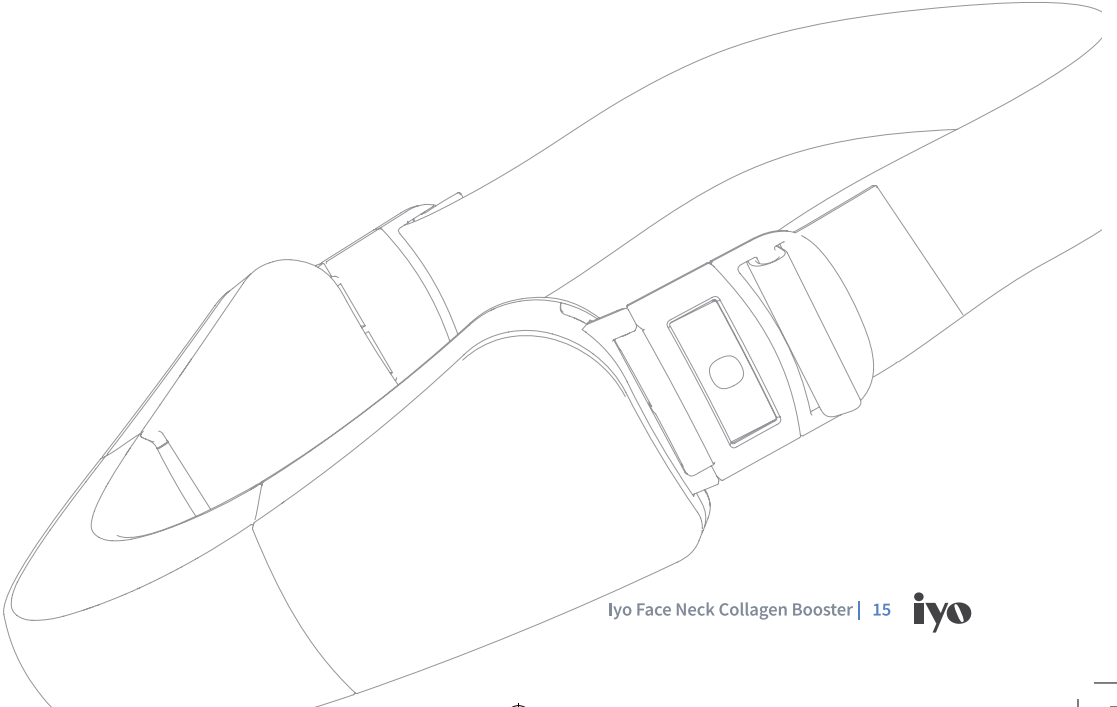

Iyo Face Neck Collagen Booster | 15 **iyo**





05 KULLANIM SONRASI

TEMİZLİK

- Cihazı temizlemeden önce düğmeye basılı tutarak kapatınız.
- Her kullanım sonrası kumanda başlığında ve ana ünite de kalan kozmetik ürünleri bir ıslak mendille, yumuşak kumaşla veya pamuklu çubukla iyice temizleyiniz ve kumanda başlığını takarak ürünü muhafaza ediniz. Temizlerken kimyasal kullanmayınız.



Cihazı suya sokmayınız veya akan suyun altında yıkamayınız.

Sorun Giderme

S: Cihaz hiç çalışmıyor.

C: Pil bitmiş olabilir. Cihazı şarj ettikten sonra tekrar deneyiniz. Hala çalışmıyorsa, lütfen müşteri hizmetleriyle iletişime geçiniz.

S: Ana ünite çalışmıyor

C: Ana ünite kablosu, kumandadaki ana ünite kablosu bağlantı noktasına düzgün takılmamış olabilir. Kabloyu düzgün bir şekilde taktıktan sonra aynı sorun devam ederse, müşteri hizmetleriyle iletişime geçiniz

S: Kontrol ünitesindeki mod seçim düğmesi düzgün çalışmıyor.

C: Ana ünite ve kontrol ünitesi birbirine bağlı değilse, Boyun/Çene/Rahatlama modları devre dışı bırakılır ve yalnızca Yüz modu seçilebilir. Ana üniteyi kullanmadan önce ana ünitenin ve kumandanın birbirine bağlı olduğundan emin olunuz.

S: Uygulama sonrası cildimde karıncalanma ve iğnelenme hissediyorum.

C: İyontoforezden gelen mikro akım cildinizde karıncalanma hissine neden olabilir.

S: Cihazı kullanmadığım sırada cilt tahrişim devam ediyor.

C: Cihazı kullanmayı bırakınız ve doktorunuza danışınız.

S: Plastik cerrahi (Botoks, dolgu vb. dahil) geçirmiş olmam durumunda cihazı kullanabilir miyim?

C: Cihazı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.





Teknik Bilgiler

Boyut (GxDxY)	Ana ünite - 173x105x52 (mm) Kumanda - 45x38x140 (mm)
Ağırlık	244 g
Güç Tüketimi	5 W
Şarj Gücü	D.C. 5,0V / 1,5 A
Güç Kaynağı	Li-ion Polimer, 3,7V / 800mAh
Kullanım için Önlemler	Kullanım kılavuzunda belirtilmektedir

Pil özellikleri önceden haber verilmeksizin benzer ürünlerle değiştirilebilir.
Üretici/İmalatçı bilgileri ilerleyen sayfalarda bulunmaktadır.

06 İMHA ETME

1. Ürün, ambalajı ve entegre şarjlı pil, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Geri dönüşüm sayesinde atıkları azalı ve çevre korunur.
2. Ambalajı malzeme türüne göre imha ediniz. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.
3. Bu sembole işaretlenen cihazlar ve boş şarjlı piller, ev atıkları
4. ile birlikte atılmamalıdır.
5. Yasal olarak eski cihazları evsel atıklardan ayrı şekilde imha etmekle ve aynı şekilde boş şarjlı pilleri beldenizdeki veya belediyenizdeki bir toplama yerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla yükümlüsünüz.
6. Dikkat! Bu cihaz, güvenlik nedenlerinden dolayı sabit olarak takılı olan ve muhafazası kırılmadan çıkarılamayan bir şarjlı pil içerir. Kurallara uygun olmayan şekilde sökülmesi, güvenlik riski oluşturur. Bundan dolayı cihazı kapalı olarak, cihaz ve şarjlı pili usulüne uygun olarak imha eden toplama yerine teslim ediniz.
7. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.





07 GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki (2) yıldır.
- 2) Satıcı ve üretici/ithalatçı tarafından malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri yazılarak kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.
- 3) Kullanıcının malı tanıtırma ve kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlardan kaynaklanan hasar ve arızalar (çizilme, kırılma, kopma, vb.) garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenir ve bu raporun bir nüshası tüketiciye verilir. Tüketiciler, rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir. Belirtilen haller dışında, bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı garanti süresi boyunca firmamızın garantisidir.
- 4) Sarf malzemeleri ve kullanıma bağlı olarak eskijen, yıpranan, kireçlenen, kirlenme nedeniyle işlevini yitiren parçalar ve bu parçaların işlevlerini yitirmesi nedeniyle oluşan hasar ve arızalar, garanti kapsamı dışındadır. Bu parçalar yetkili servislerden ücreti mukabilinde satın alınabilecektir. Yetkili servislerden satın alınmayan parçalar nedeni ile oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 5) Ürüne ilişkin; ürün tanıtımı, montaj işlemleri, teknik kontroller vs. işlemler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Yetkili servis dışındaki şahısların müdahalesi durumunda, malın tamamı garanti kapsamı dışındadır.
- 6) Voltaj düşmesi veya yükselmesinden dolayı veya hatalı elektrik tesisatı nedeniyle meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 7) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Tüketici, arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapabilir. Ancak uyuşmazlık halinde ispat yükü tüketiciye aittir.
- 8) Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden itibaren arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis edecektir. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçı bu yükümlülükten kurtulur.





9) İş günü; ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve Pazar günleri dışındaki çalışma günleridir.

10) Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

11) Malın garanti süresi dışında, servis istasyonları tarafından verilen montaj, bakım ve onarım hizmetiyle ilgili olarak, bir yıl içerisinde aynı arızanın tekrarı halinde tüketiciden herhangi bir isim altında ücret istenemez. Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar bu madde kapsamı dışındadır.

12) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, aşağıda sınırlı sayıda sayılan seçimlik haklardan birini kullanabilir:

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

d) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme

13) Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

a) Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla tekrar arızalanması,

b) Tamiri için 29029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği’nde belirtilen gereken azami sürenin aşılması,

c) Tamirin mümkün olmadığı için yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesini veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.

14) Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranının bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvuranın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

15) Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

16) Satılan mala ilişkin düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez.

17) Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.

18) Tüketiciler şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine yapabilirler.



08 GARANTİ BELGESİ

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN


ÜNVANI : Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış. Tic. A.Ş.
MERKEZ ADRESİ : Saruhan Plaza, Basın Ekspres Yolu, No:39 Küçükçekmece /
İstanbul, TÜRKİYE
TELEFONU : 0 212 249 70 69
FAKSI : 0 212 251 51 42
FİRMA YETKİLİSİNİN
İMZASI - KAŞESİ :

Fakir FAKİR ELEKTRİK EV ALETLERİ DİŞ. TİC. A.Ş.
FAKİR ELECTRICAL APPLIANCE EXPORT TRADE CO. INC.
HAUSGERÄTE Merkez: Halkalı Merkez, No: 39 Ekspres Cad. No:39
Küçükçekmece / İstanbul
Tel: (212) 249 70 69 Fax: (212) 251 51 42
Mersis No.: 030200315000018 İşletme Mkt. İstanbul
Ticaret Sicil No: 263744 Boğaziçi Kurumlar V.D. 380051910

ÜRÜNÜN CİNSİ : YÜZ VE BOYUN SIKILAŞTIRMA LED BAKIM CİHAZI
MARKASI : İYO
MODELİ : İYO FACE & NECK COLLAGEN BOOSTER
MODEL NO : 40000011
ÜRETİM TARİHİ :
BANDROL VE SERİ NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL
AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 (YİRMİ) İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN ÜNVANI :
ADRESİ :
TELEFONU :
FAKSI :
FATURA TARİH VE NO :
TARİH – KAŞE – İMZA :

Bu belgenin kullanılmasına; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

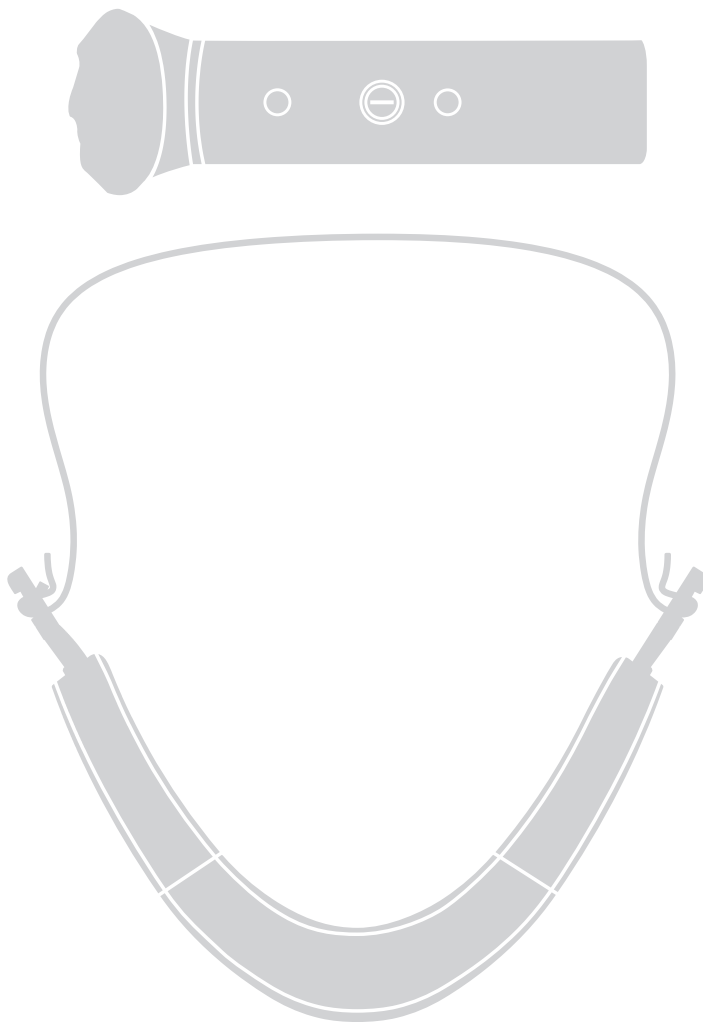




iyo



Üretici/İthalatçı:
Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış. Tic. A.Ş.
Saruhan Plaza, Basın Ekspres Yolu, No:39
K.Çekmece/İstanbul, TÜRKİYE
Tel: +90 212 249 70 69
Faks: +90 212 293 39 11
Yetkili Servislerimize www.fakir.com.tr'den
ulaşabilirsiniz.
Müşteri Hizmetleri : 444 0 241
www.fakir.com.tr

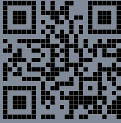

Fakir Hausgeräte GmbH
Industriestraße 6 D-71665 Vaihingen / Enz
Postfach 1480 D-71657 Vaihingen / Enz
Tel: +49 7042 / 912-0
Fax: +49 7042 / 912-360
www.fakir.de



Developed by Fakir Hausgeräte

